

優れた強度と極めて滑沢な表面性状をローコストで実現。

CHARM FIL[®]
LIGHT CURING COMPOSITE RESIN

チャームフィル

新発売



ナノハイブリットフロアブルコンポジットレジジン
チャームフィル フロー




ナノハイブリットフロアブルコンポジットレジジン
チャームフィル フローHV
(ヘビーボディ)



ナノハイブリット充填用コンポジットレジジン
チャームフィル プラス

◆ 従来型フィラーに比べ長期間審美性が持続


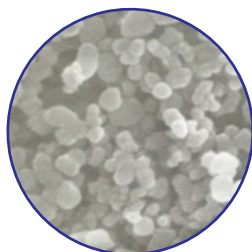


【SEM像 ×4000倍】

平均粒径 0.4μm(400 ナノメートル) という超微細な表面特殊処理無機フィラー+独自の高密度均一分離テクノロジーにより、優れた強度と極めて滑沢な表面性状を実現しました。



◆ 優れた物性と辺縁封鎖性

チャームフィル プラス・フローは重合時の発熱が少なく収縮もそれぞれ 1.2%・2.3%と極めて低く、辺縁部漏洩を効果的に防止します。

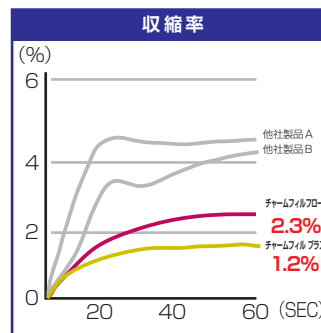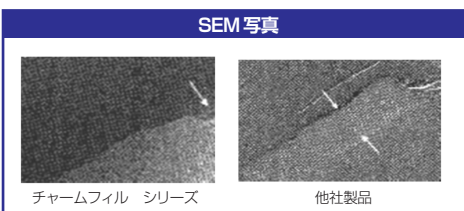


◆ 極めて滑沢な表面性状とツヤ

チャームフィルシリーズは最新のナノフィラーテクノロジーにより研磨が容易、短時間で滑沢なレジジン面が得られます。また、摩耗しても超微細のフィラーのため、レジジン面の凹凸が小さく摩耗後も長期間ツヤを維持します。

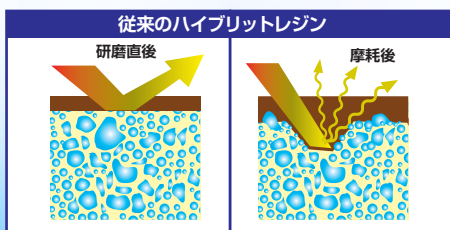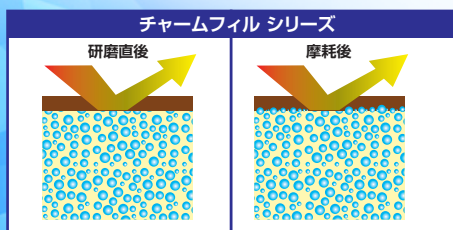


◆ 高い強度と優れた耐摩耗性

ナノフィラーが高密度に充填されています。そのためチャームフィルは従来型白歯部用CRを超える高い強度を実現しています。

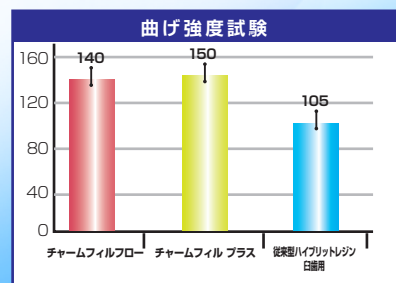

◆ 高いX線造影性

チャームフィルシリーズは、ペーストタイプ・フロータイプ共にバリウムガラスフィラーの配合により高いX線造影性を実現しています
厚さ2mmのアルミ板に対し160~180%高い造影性を有します。

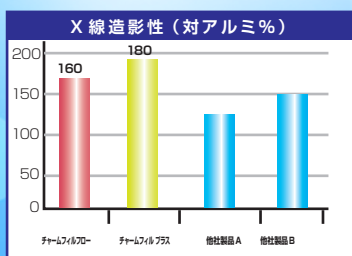

【発売元】

BSA 株式会社ビーエスエーサクライ
〒468-0022 愛知県名古屋市天白区高島一丁目117-1
TEL: 052-805-1181 FAX: 052-805-1182
http://www.bsa-sakurai.co.jp
e-mail: contact@bsa-sakurai.co.jp

チャームフィルシリーズはペーストタイプ・フロアブルタイプで全3タイプ

チャームフィル プラス	チャームフィル フロー	チャームフィル フローHV <small>(ヘビーボディ)</small>
<p>ベタつかず、インスツルメントで自在に付形。</p> <p>CHARM FIL LIGHT CURING COMPOSITE RESIN PLUS</p>  <p>形態維持の比較 (室温37℃) ※付形直後 (左) と3分後 (右)</p>  <p>流動性 ← → 付形性</p> <p>ペーストタイプ</p> <p>管理医療機器 228AKBZX00038000</p>	<p>流動性が良く窩洞へのなじみが良好。</p> <p>CHARM FIL LIGHT CURING FLOWABLE COMPOSITE RESIN FLOW</p>  <p>抽出後垂直に立て30秒後</p>  <p>流動性 ← → 付形性</p> <p>フロアブルタイプ</p> <p>管理医療機器 228AKBZX00037000</p>	<p>流動性とタレにくさのベストバランス。</p> <p>CHARM FIL LIGHT CURING FLOWABLE COMPOSITE RESIN FLOW HV <small>HIGHER VISCOSITY</small></p>  <p>抽出後垂直に立て30秒後</p>  <p>流動性 ← → 付形性</p> <p>フロアブルタイプ</p> <p>管理医療機器 228AKBZX00037000</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ・1～5級の窩洞・前歯部・臼歯部の大きな窩洞の充填に。 ・チャームフィル フローと組み合わせて臼歯部咬合面の充填に。 ・ベタつかず、インスツルメントで自在に付形ができます。 ・天然歯に近いシェード・1.2%の低収縮性率と高い圧縮強度を有します。   <p>色調：4色=A2.A3.A3.5.B2</p> <p>【セット内容】 4g×1本入り</p> <p>標準価格 ¥1,200</p> <p>高品質最新CRでこの価格!! 乳歯の大きな窩洞にも最適です。</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ・低収縮性で積層が行いやすいフロアブルレジンです。 ・凹凸のある高底や細かい部位に最適。 ・臼歯部咬合面にもご使用頂けます。 ・オパール効果で審美性に優れ、充填後は天然歯のような自然な仕上がりに。  <p>薄い5級窩洞・臼歯高底部ライニング チャームフィルプラスと合わせて。</p>  <p>チャームフィルプラス チャームフロー フロアブルならではの窩壁適合性 フロアブルレジンを1層流し込むことで気泡の巻き込みも簡単で簡単に窩底を整理できます。 10秒照射で最大4mmまで積層可能</p>  <p>色調：4色=A2.A3.A3.5.B2</p> <p>【セット内容】 2g×2本入り ディスプレイチップ×8</p> <p>2g シリンジ1本あたり 750円</p> <p>標準価格 ¥1,500</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ・3級、5級窩洞 欠損、矯正用ブラケットへの接着。 ・チャームフィル フローの高い物性・審美性はそのままに思い通りの形態付与が行えます。 <p>ブラケットライアングルの治療</p>  <p>コアビルトアップ</p>   <p>色調：4色=A2.A3.A3.5.B2</p> <p>【セット内容】 2g×2本入り ディスプレイチップ×8</p> <p>2g シリンジ1本あたり 750円</p> <p>標準価格 ¥1,500</p>

チャームフィル シリーズは世界64カ国で年間150万本が使われるデンキストのベストセラー商品です。この機会にぜひお試しください。

■ご注文は信頼ある