

依然と続くアメリカ・南米・ヨーロッパでの感染拡大!!
コロナ2波の懸念、マスクの備蓄は充分にされていますか？

厚生労働省・新型インフルエンザ対策推進室では、インフルエンザのパンデミック（大流行）に備えて、少なくとも2週間分の食料の備蓄と、1人当たり25枚程度のマスクの準備を呼びかけています。パンデミック後は特にマスクの不足が予測されますので、医療機関としての目安として、一人当たり180枚以上（6ヶ月分）の備蓄をおすすめしています。

発売から25年　ヘパール3マスク

ラテックスフリーでデリケートなお肌にも安心。

BSA

HEPA-R3
MEDICAL MASK



ブルー　グリーン　イエロー　ピンク　ホワイト

●1箱50枚入（1カートン20箱入）

素材	3層ポリプロピレン/ノンボンド
BFE	99.6%以上(2.9ミクロン)
PFE	99.5%以上(0.1ミクロン)
ゴムの種類	ウレタン丸平ゴム
ノーズピースの素材	樹脂製幅広ノーズピース

お顔の小さい方に。　Mだと大きいSだと小さいと言う方はコチラ！　標準サイズ


S SIZE　MS SIZE　M SIZE

※グリーン・イエローは2021年より再入荷予定です。
MSサイズは2020年9月販売再開いたします。
価格:オープン価格(材料店様にお問い合わせください)。



■ヘパール3マスクは中国全土で8000社あると言われていたマスク工場の中でもわずか数社しかないFDA認定・CE認証の2つを取得した工場で製造されています。

FDA・・・アメリカ食品医薬品局（Food and Drug Administration）
CE・・・EUの法律で定められた安全性能基準を満たす基準

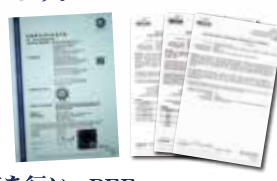

■日本でもおなじみのアメリカの大手・有名ブランドのマスクを製造している工場と同じ原材料、同じ製造機器で作られています。

■HACCP基準のクリーンルーム内で厳格な衛生管理のもと製造されています。

HACCP・・・Hazard Analysis and Critical Control Pointは、食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因（ハザード; Hazard）を分析しそれを最も効率よく管理できる部分（CCP; 必須管理点）を連続的に管理して安全を確保する管理手法



■受け入れた原材料は、自社ですべて品質検査を行い、BEF・PEFの検査基準を満たしたものだけを厳選し使用しています。

BEF・・・細菌濾過率（%）細菌を含む、平均約3μmの粒子が濾過された率を示します。
PEF・・・微粒子濾過率（%）平均約0.1μmの微粒子が濾過された率を示します。

顔全体を覆う
大面積で
しっかりガード



感染対策さらにUP。マスクと併用でダブルガード!!

サーフェスバリア　フェイスシールド

●サイズ:320×220mm　●厚み:約0.27mm　●重さ:約39g
●材質:PET、ゴム筋、弾性海綿　●カラー:クリア

1枚標準価格 ¥150



NEW



コロナ対策には、マスクに加え、フェイスシールド・防御ガウンは必須アイテム
感染防止への取組をアピールBSAディフェンダーガウン新発売

●手首も伸縮性のある幅広タイプ
●蒸れにくく、動きやすい軽量（25g）フリーサイズ

●カラー：ブルー　●サイズ：フリーサイズ　●材質：ポリプロピレン不織布　●男女兼用：着丈：105cm　●未滅菌

※モデル身長170cm

標準価格10枚入 2,800円

BSAなら1枚あたり 280円

■販売店名

流水式次亜塩素酸水生成器　コロナも
エルビノ　なら　安心



経済産業省所管の独立行政法人であるNite（ナイト）では経済産業省の要請を受け次亜塩素酸水、界面活性剤等の代替消毒物質の新型コロナウイルスに対する有効性評価を行っております。その結果、

nite　により　35ppm以上

有効塩素濃度

独立行政法人　製品評価技術基盤機構

の次亜塩素酸水が、

新型コロナウイルスに対し有効
であることが報告されました。

発表日：令和2年6月26日（金）




衛生管理を徹底的に！
感染症対策！
エルビーノなら

有効塩素濃度
35ppm以上




次亜塩素酸水は、特定の原液を電気分解することにより生成される次亜塩素酸(HOCl)を主成分とする水溶液です。次亜塩素酸は強い除菌力を有しており、大腸菌や黄色ブドウ球菌、C型肝炎ウイルス、ミュータンス菌など様々なウイルスに対してとても高い効果があります。また次亜塩素酸ナトリウム(塩素系消毒薬の主成分)では効果の表れにくいカビ類に対してもその効果を発揮します。

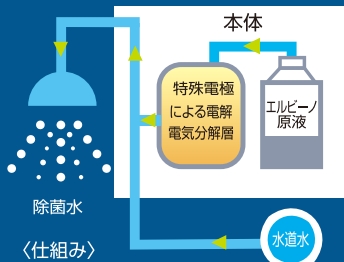

Degerming 高い除菌力・消臭力


ほとんどすべてのウイルス細菌に効果があります。

ノロウイルスや黄色ブドウ球菌、大腸菌、悪臭の原因菌などのウイルスや細菌をしっかりと除菌します。その除菌力は漂白剤やアルコール消毒と比べても優れていることが実証されています。

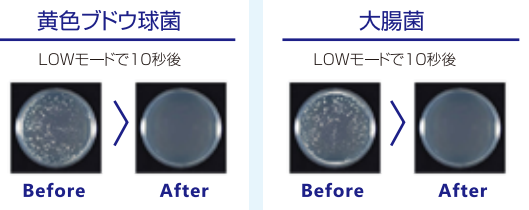

■ウシウイルス性下痢症ウイルス不活性化試験 (C型肝炎ウイルス代替)

※C型肝炎ウイルスの感染力を失う不活性化試験には、一般的にC型肝炎ウイルスと遺伝子情報が似ているウシウイルスを使用します。

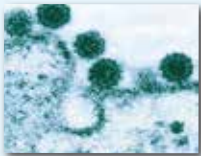

■一般的な漂白剤(塩素系)との効果比較

※40ppmの次亜塩素酸水は、1000ppmの次亜塩素酸ナトリウムと同等の除菌力を示します。

細菌・ウイルス	次亜塩素酸水 (30ppm)	次亜塩素酸ナトリウム (1000ppm)
ノロウイルス (ノコカリシウイルス)	◎(10秒)	◎(10秒)
黄色ブドウ球菌	◎(10秒)	◎(10秒)
MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)	◎(10秒)	◎(10秒)
セレウス菌 (Bacillus cereus)	△(3~5分)	△(3~5分)
レジオネラ菌 (Legionella pneumophila)	◎(10秒)	◎(10秒)
サルモネラ菌 (Salmonella enteritidis)	◎(10秒)	◎(10秒)
腸炎ビブリオ (Vibrio parahaemolyticus)	◎(10秒)	◎(10秒)
腸管出血性大腸菌 (Escherichia coli O-157:H7)	◎(10秒)	◎(10秒)
カンピロバクター菌 (Campylobacter jejuni)	◎(10秒)	◎(10秒)
インフルエンザウイルス (2009年新型を含む)	◎(10秒)	△(10秒)※
カンジタ菌 (Candida albicans)	◎(10秒)	◎(10秒)
黒カビ (アスペルギルス Aspergillus)	△(5分)	×(120分)
青カビ (ペニシリウム Penicillium cyclopium)	△(5分)	×(120分)

殺菌効果または不活性化効果 ◎ (有効) > ○ > △ > ▲ > × (無効) ※塩素濃度1000ppmの場合は不活性化可能

次亜塩素酸水で除菌不活性化できる細菌・ウイルス・カビ類(一例)			
●新型コロナウイルス(COVID-19)	●黄色ブドウ球菌	●サルモネラ	●カンピロバクター菌
●MRSA	●腸炎ビブリオ	●ノロウイルス	●ミュータンス菌
●セレウス菌	●腸管出血性大腸菌	●インフルエンザウイルス	●シンジパリス菌
●ウシウイルス性下痢症ウイルス(C型肝炎類似ウイルス)	●センダイウイルス(気管支炎類似ウイルス)	●黒カビ	●カンジタ菌
●コクサツキウイルス(A型肝炎類似ウイルス)	●単純ヘルペスウイルス(B型肝炎類似ウイルス)	●青カビ	●緑膿菌

NITE(ナイト) [独立行政法人 製品評価技術基盤機構] 令和2年6月26日(金)の報告書によると、次亜塩素酸水有効塩素濃度35ppm以上新型コロナウイルスに対して有効であることが確認されています。

エルビーノなら Hモード で新型コロナウイルスに有効な
有効塩素濃度 35ppm以上の次亜塩素酸水が生成できます。

使い方・活用例



Safty 安心・安全

人と環境にやさしい



エルビーノ除菌水は、万が一誤飲してしまっても問題ありません。手荒れの心配もなく、作業する人の健康管理に配慮できます。環境にも優しいので安心して毎日お使い頂けます。

Anywhere 様々な場所に使える

無味無臭で器具・設備も傷めない

味や臭いがほぼ無いため、漂白剤では使用がためらわれた食品のすすぎ洗いや器具の洗浄、施設の清掃、洗濯など様々な場所でお使い頂けます。また水と同じように使えるのでオートクレープのかけられない素材、インスツルメント等の洗浄、スプレーで空間噴射し室内の除菌消臭材として幅広い用途で安心してお使い頂けます。コロナ対策の他、様々な器具・設備にお使い頂けます。

エルビーノの
ここがおすすめ

4つのPoint

Point 1
コンパクト

320W×120D×300H (mm)のコンパクト設計。壁掛けもできるので省スペースの設置も可能です。

Point 2
用途に合わせたモード

手洗いに適した LOWモードと器具の流水漬け置きに適した Highモードからお選びいただけます。

Point 3
使いやすい

センサーに手をかざすだけでオートスタート!手を汚すことなく操作ができます。

Point 4
低コスト

1回10秒。わずか2.9円の低コスト。約700ccの生成水が自動的に流れます。次亜塩素酸水が水道水感覚でお使い頂けます。

たっぷり使える

専用原液1本(20ℓ)で約4,500ℓもの次亜塩素酸水が生成出来ます。

エルビーノ 導入のメリット

- センサーに手をかざすだけですぐに流水による洗浄・除菌を同時に行う事が出来る。
- 10秒で自動停止。人によるバラつきがないので確実な除菌が可能。
- 皮膚に近いpH値でお肌にやさしい微酸性。
- 高い除菌性能と広いスペクトル。
- 希釈・調整の必要がない。
- 他の薬剤と比べ低コスト。



■製品仕様

外形寸法	W320×H350×D200mm(卓上仕様) W320×H300×D120mm(壁掛仕様)
乾燥時重量	3.5Kg
電源	単相100V(50/60Hz)
消費電力	最大定格90W 待機時5w
給水	上下水質基準適合 水圧 0.2~0.75MPa 水温 5~30℃
生成水有効塩素濃度	L-mode/ 26ppm H-mode/38ppm (LoモードHiモード切替機能) ※1
次亜塩素酸水生成量	約4リットル/分(250kPa)
配管口径	水道水入口20a(PF3/4)
運転方式	センサー感知による10/15秒運転手動スイッチによる連続運転(最長15分)
設置環境	換気装置がある場所・100V電源と給排水設備のある場所
製造元	タカヤ株式会社 岡山県井原市井原町661-1
エルビーノ 標準価格	1台 ¥450,000 (税別)
エルビーノ原液(専用原液) 標準価格 20ℓ1ケース	1ケース ¥18,000 (税別)
この専用原液をエルビーノ本体で電気分解を行い次亜塩素酸水を流水式で生成します。20ℓのエルビーノ原液で一般的な使用(L-mode/10秒で、50ℓ/日)で、4ヶ月程度ご使用頂けます。	

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策の助成金情報

新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用の補助を行っています。

補助上限額	
病院(医科、歯科)	200万円+5万円×病床数
有床診療所(医科、歯科)	200万円
無床診療所(医科、歯科)	100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所(医科、歯科)	70万円

補助の対象費用

感染拡大防止対策に要する費用
院内等で感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保に要する費用
(従前から勤務している者及び通常の医療提供を行う者に係る人件費は対象外)

事業の詳細はこちら 緊急包括支援交付金 検索 →https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12014.html

