

アルギン酸印象材がこびりついた 網トレなど印象トレの

清掃がより早く・簡単に

スプレー式 **強力** 分離材

BSA

セパゾール 新発売



使用前に
ネットに吹き

短時間で
ピッカピカ!!

網トレに

フラスコに

林歯科商店の人気商品セパゾールが再び商品化されました。トレークリーナーへの浸透時間を大幅に短縮。短時間でトレがキレイに!! だからトレへのダメージも最小限で長持ちします。しかも清掃時間も短くなって効率UP。その他、埋没前のフラスコにシュッとひと吹きするだけで重合後の石こうを簡単に外すことができます。

- 用途**
- 印象トレと印象材の分離に
 - 義歯重合フラスコと石こうの分離に
 - 咬合器のマウンティングプレートと石こうの分離に
 - プライヤー等のジョイント部の潤滑に

2021年4月で廃業の林歯科商店様 取扱い商品の一部を弊社で販売させて頂く事になりました。「PCセパレーター」「ホーム」「セパゾール」は林歯科商店の成分・配合・容量など全く同じものになります。



短時間で手間なくトレが
ピッカピカ

売れてます

◆セパゾール

容量タップリ
420g入

商品コード
1058

標準価格 2,200 円

溶けるんです

スピード洗浄 + 除菌・消臭 もできてさらに、アルギン酸塩印象材の溶解スピード・溶解・軟化量共に 水1ℓ粉末50g 使用の場合
トップレベルの性能!! でありながら トレーに優しい。清掃処理 がたっぷり できて

1回あたり
75円~



粉末タイプ

900gボトル



1kg詰替用

処理量が多い!!

トレークリーナー 印象材	A社	E社	C社	BSA 溶けルンです
A社	512g	101g	610g	795g
B社	497g	269g	648g	990g
C社	289g	127g	497g	709g
PH	8.0前後	8.0前後	8.0前後	7.0前後

トレークリーナー1000ℓあたりの処理能力(溶解・軟化量) ※濃度は各社指定濃度

印象材の大きなかたまりを除去したトレを30分~1時間つけおきするだけ。除菌・消臭効果もあり簡単・安心。アルミ・真鍮・ステンレスすべてOK! 処理後の水洗いを充分に行って頂きましたらトレの変色はほとんど起こりません。

商品コード	入数	標準価格
2030	900gボトル	¥1,800/本 (税別)
2031	1kg詰替用	¥1,600/バック (税別)

■販売店名



BSA [発売元]株式会社ビーエスエーサクライ
TEL.052-805-1181 email:contact@bsa-sakurai.co.jp

Pit[®] 新発売

毎日多くご使用されるクリニック様向けに、
大量仕入れにより超コスパを実現したアプリーケーターです。

100本入1筒なら

標準価格 **500円**

1本あたり
5円



毎日使うものだから
お値打ち価格



安定感のあるスタンド型。植毛側を上にして収納。底面から1本ずつとり出しやすい衛生的で便利な収納ケース入りです。



こちらの100本入 × 4筒のPitアソートパックなら

4本で
標準価格

1500円

3本あたり
7.75円

さらに、こちらを期間限定でPitお試しパックとして3,000パックをご用意しました。
通常、4筒 400本入りPitアソートパック1,500円のところ

2022.12/5~2023.1/31までの2ヶ月間
初回限定3000パック

お試し価格 **60% OFF**

400本入り
標準価格

お試しパックがナント

600円


1本あたり
1.5円

※限定3000パック
無くなり次第終了と
させていただきます。



実寸大

レギュラー ファイン スーパーファイン エキストラスリム

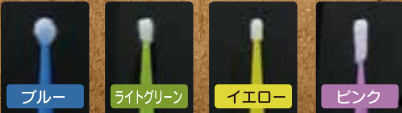

1ステップ&マルチユース 高接着性ボンディング材

SevenBond[®]

セブンボンド

ボンディング材も7世代目へ


7th

オールインワンでシンプルな操作

接着力に自信あり

セブンボンドならエッチング、プライミング、ボンディングが1液（オールインワン）で行えます。
コンポジットレジン修復だけでなく、各種補綴物に対しワンステップで長期的に安定した接着を実現しました。

セブンボンドは、前処理不要の一液性セルフエッチボンディング材です。臨床実績のあるMDP (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) モノマーに複数のリン酸エステル系モノマー・プライマーをバランス良く配合。それによるスミヤー層溶解性・歯質脱灰性の向上により、エナメル質象牙質共に強固に接着します。

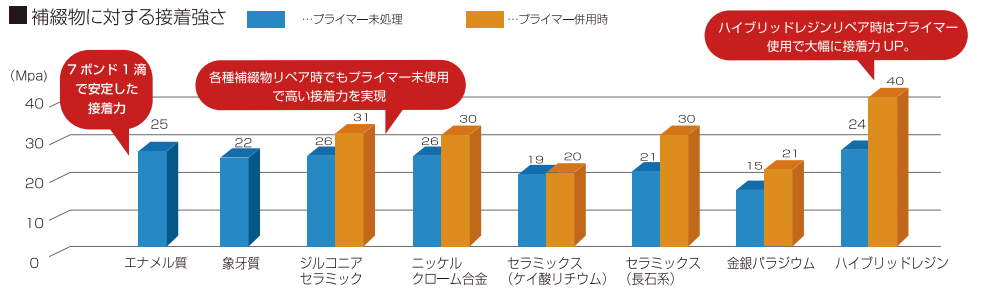

審美性を追求した修復にも最適



- 粘性が低く、歯質への浸透性・ぬれ性が向上
- ボンディング層も審美性に優れた5μm以下を実現。
- 冷蔵保管不要で、滴下後の操作余裕時間は5分。多数歯にも余裕で処理が可能です。

リン酸エステル系モノマー「MDP」配合で安定した接着力&高いコストパフォーマンスを実現

セブンボンドキット

セット内容
・ボトル (5ml) × 1
・ディスプレイアプリーケーターブラシ × 20本
・ディスプレイティッシュ × 20枚
一般的名称 歯科用象牙質接着材 (管理医療機器) 230AKBZX00071000



標準価格 **¥7,800**

セブンボンドリフィル

セット内容
・ボトル (5ml) × 2



一般的名称 歯科用象牙質接着材 (管理医療機器) 230AKBZX00071000

標準価格 **¥12,200**