

ご好評のBSAスプリント(硬質ジスク)・マウスガード(軟質ジスク)に**新サイズが追加新発売!!**皆様にお試しいただきたいので、



BSAから
矯正用スプリントのφ120mmサイズ
マウスガードのφ125mmサイズ
が**追加新発売**されたので、
しがも今日は早く買えちゃって
しらんけど。

全品セール価格でご提供

サークルタイプ // も スクエアタイプ //

お試し
特価

BSAスリーライナーハード (硬質タイプ) 矯正用スプリントとしてBSAで人気No.1商品です。おかげさまで昨対比売上233%!!

アライナー・リテーナー矯正用として開発されたクリア色のポリエチレンテレフタレート(PET)です。
●3層コンポジットシートの為、割れにくく、弾性・復元力に優れます。 ●即重レジンと接着性があるためスプリント製作時の筆積みが可能。
●飲料容器と同じ安全性が検証されたPET製シートです。

★ご希望にお応えてサークルタイプの直径が**120mm**と**125mm**の2種類になりました。

●届出番号:23B2X00017000281 ●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET) ●硬質シート

追加
新発売

サークルタイプ (丸型)	厚み (mm)	入数 (枚)	標準価格
φ120mm	0.5	10	850円 セール価格は ディーラー様まで
	0.625		
	0.75		
φ125mm	0.75		

スクエアタイプ (角型)	厚み (mm)	入数 (枚)	標準価格
127×127mm	0.5	10	850円 セール価格は ディーラー様まで
	0.625		
	0.75		

BSAスプリントプレミア (硬質タイプ) おかげさまで昨対比売上270%!!

高品質・高純度のポリエチレンテレフタレート樹脂(PET)使用の3層ジスク。今お使いのスプリントジスクと全く同じ加熱時間・ご使用方法ができ、エコ価格!これが人気のヒミツです。即重レジンともしっかり接着します。

●届出番号:23B2X00017000178 ●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET) ●硬質シート

お試し
特価

サークルタイプ (丸型)	厚み (mm)	入数 (枚)	標準価格
φ125mm	0.5	10	750円 850円 950円 セール価格は ディーラー様まで
	0.75		
	1.0		

スクエアタイプ (角型)	厚み (mm)	入数 (枚)	標準価格
127×127mm	0.5	40	1400円 セール価格は ディーラー様まで
	0.75	30	
	1.0	25	
	1.5	15	
	2.0	12	
	3.0	7	

BSAマウスガードプレミア (軟質タイプ) おかげさまで昨対比売上254%!!

BSAマウスガード プレミア は、成形性と衝撃吸収性に優れたEVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)で弾性、柔軟性、強靭性に優れています。形状は四角と丸の2タイプ、お使いのパキュームフォーマーに合わせてお選び頂けます。BSAマウスガードプレミアは今お使いのマウスガードと全く同じ加熱時間・ご使用方法で成型頂けます。

※食品衛生法合格：食品、添加物等の規格基準、器具及び容器包装規格試験(ゴム製器具)

★サークルタイプの直径が**120mm**と**125mm**の2種類になりました。

追加
新発売

サークルタイプ (丸型)	厚み (mm)	入数 (枚)	標準価格
φ120mm	0.5	35	1480円 セール価格は ディーラー様まで
	1.0	25	
	1.5	15	
	2.0	13	
	3.0	11	
	3.8	10	


スクエアタイプ (角型)	厚み (mm)	入数 (枚)	標準価格
127×127mm	0.5	35	1580円 セール価格は ディーラー様まで
	1.0	25	
	1.5	15	
	2.0	13	
	3.0	11	
	3.8	10	

お試し
特価

アライナー専用 プライヤー

NEW
新発売

新発売キャンペーン (2023.7/3 ~ 8/31)
期間中にOA プライヤー5本セット(①~⑤のアソート)でお求め頂きますと、20%OFFの1本あたり12,000円のスペシャルプライス!!

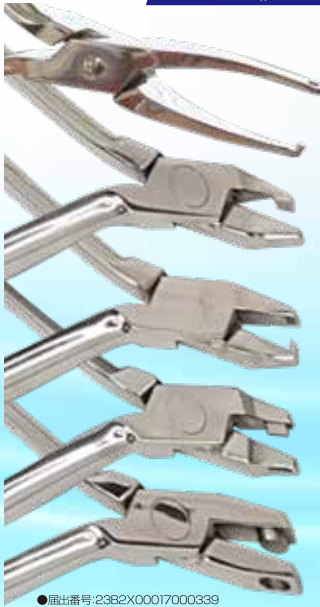

OA プライヤーは使用感にトコトンこだわったエルゴノミクスデザイン&ドイツ製ステンレス鋼採用で高品質。効率的に扱えるよう最適化された設計で、アライナーを利用した矯正治療を、より柔軟で効果的に行うことが出来ます。

- ①型番:WBT-166 リテンションフォーミングプライヤー**
トルクやローテーションのコントロールの調整時に、クリアアライナー(OA)上の矯正力を与えたい部位に凹みをつけるためのプライヤーです。
(くぼみ付タイプ) (突起の幅:φ1mm)
- ②型番:WBT-174 縦ノッチフォーミングプライヤー**
頬側・舌側の近心・遠心のラインに沿って垂直方向にアクチベーション(くぼみ)を入れることにより、ローテーションコントロールを促進します。
(くぼみ付タイプ) (くぼみ:縦4×横2mm)
- ③型番:WBT-175 横ノッチフォーミングプライヤー**
頬側・舌側の辺縁に水平的なアクチベーション(くぼみ)を入れることにより、ルートトルクを促進します。
(くぼみ付タイプ) (くぼみ:縦2×横4mm)
- ④型番:WBT-176 ティアドロップフォーミングプライヤー**
アライナーの辺縁にパンチすることで、エラストックをかける際に使用する涙滴型のホールを開けることができます。このホールがあることで、患者さん自身でエラストックを交換することがより容易になります。
(穴あけタイプ) (穴:Aφ2→Bφ1mm)
- ⑤型番:WBT-177 ハーフホールフォーミングプライヤー**
リングボタンやブラケットなどを併用する際、その接着位置を確保するために、アライナーの辺縁部に半月型のくりぬきを作ることができます。また、装着時の軟組織にあたる部分のトリミングにもご使用頂けます。
(穴あけタイプ) (穴径:φ6mm)



●届出番号:23B2X00017000339
標準価格 1本
各 15,000円