

根管内の細菌・汚れの除去にはしなやかで柔軟性あるポリマーチップでの洗浄が有効です。イーजीクリーンマックス新発売

BSA

パシロジック

Ni-Ti 製ファイル BassiLogic でおなじみの
Easy Bassi 社が開発した新しい根管洗浄ファイル

Easy clean maxx で 根管洗浄

機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器 管理医療機器 能動型機器向け歯科根管内清掃器具 (70714002)

1. 破折リスクの最小化と歯質温存

非切削性: 柔軟性ある特殊ポリマー製チップがやさしく、しなやかに根管壁内の感染歯質をへらのようにかき取ります。プラスチック(ポリマー)製なので、根管壁の象牙質を削り取ることはありません。

2. 高い洗浄効率(ハイドロダイナミクス)

独自の翼状(ヘリカル)形状: チップが回転することで強力な渦(ボルトテックス)を発生させます。これにより、器具が届かない「側枝」や「根尖部」の隅々まで洗浄液(薬液)を行き渡らせ、細菌や削りカスを物理的に5000~10000回転の高速回転でかき取ります。低速回転でも液体に振動を与え、洗浄効率を向上させます。

3. 優れた柔軟性と追従性

複雑な解剖学的形態に対応: 湾曲根管にもチップがしなやかに曲がり追従します。真っ直ぐなチップでは届かない部位の洗浄が可能です。又柔軟なため、根尖狭窄部付近までリスクを低減して挿入し攪拌できます。

4. 高耐久性・高コストパフォーマンス、そして容易な操作性


高価な超音波スケーラーやレーザー機器を必要とせず、普段使用しているコントラアングルに装着するだけで、最新の根管洗浄プロトコルを導入できます。手動の洗浄に比べて短時間で高い洗浄効果が得られるため、ケアタイムの短縮(効率化)に直結します。

1本あたり

130円



コントラを使って効率的に根管内を洗浄。

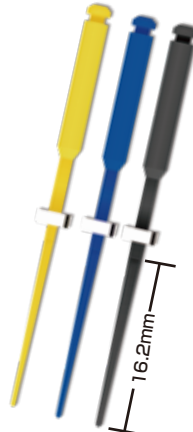

■販売名: イーजीクリーン マックス

回転数 (rpm) 5000~10000 ●ディスプレイ ●作業部の長さ16.2mm

商品コード	カラー	サイズ	テーパー	入数	標準価格
55281	イエロー	20	.04	18	¥2,340 /箱(税別)
55282	ブルー	30	.04	18	
55283	ブラック	40	.04	18	

パシロジック

BassiLogic ハンズオンセミナー好評開催中!!

ハンズオンセミナーも今年1月で累計137回、おかげさまで大変ご好評いただいています。参加された先生皆様が驚かれるパシロジック翌日から使いこなせるコツをパシ認定の講師3先生がわかりやすくハンズオンで完全指導。



新潟県内市 新潟市歯科病院
佐久間 利喜先生



愛知県海部郡 月星 太先生



札幌市中央区 札幌歯科
坂本 渉先生

東京会場

名古屋会場

札幌会場

- 札幌会場...3/20・5/10・7/20
- 東京会場...3/29・4/19・5/24・6/28・7/26
- 名古屋会場...3/8
- 金沢会場...7/26 ●大阪会場...5/10
- 金沢会場...7/26 ●広島会場...6/7 ●福岡会場...4/5

ハンズオンセミナー受講料

標準価格 39,800円(税込)

*セミナーお申し込みは完売となります。ご希望の日時に間に合わない場合がございます。

セミナーのお申し込み・会場の確認はこちらから➡

お申込み



高度な熱処理技術と0.1テーパーが支える、保存的な根管形成

1 独自の「0.1テーパー」が実現する低侵襲形成

パシロジック独自の0.1テーパー(01)ラインナップを搭載。根管壁の過剰な削除を最小限に抑え、天然歯の構造(ペリサピカルデン等)を最大限に温存します。再根管治療においても、既存の根管形態を壊さない精密なアプローチが可能です。

2 高い柔軟性と耐疲労性の両立

独自の熱処理を施したニッケルチタン合金を採用。優れた柔軟性により、複雑な湾曲根管においても根管形態への追従性を高め、ファイルへの負荷を軽減します。

3 直感的な操作を可能にする「シングルレングス・テクニック」

根管の長さに合わせてファイルを交換する複雑なステップを簡略化。全号数で作業長(Working Length)まで直接到達を目指すため、手技の煩雑さを解消します。術者の習熟度に関わらず、一貫した精度の根管形成をサポートし、臨床における精神的ストレスを軽減します。

4 高い経済性による臨床への貢献(1本880円)

1本あたり880円(税別)という導入しやすい価格設定を実現。シングルユース(単回使用)を推奨する現代の感染管理基準において、コストを抑えつつ常に高い切削効率を維持することが可能です。